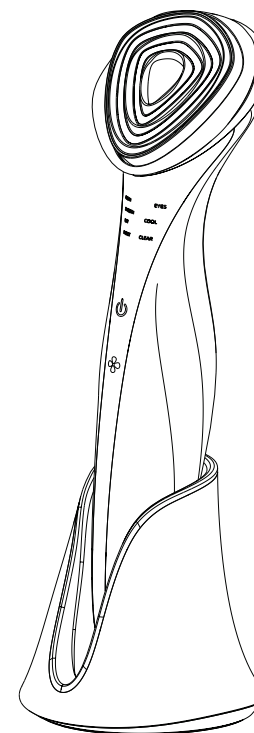


Upute za upotrebu





BEEABeauty

TB-2187


ALL-IN-ONE
uređaj za njegu lica
CANC, RF, LED, ION, Hot&Cold
ANTI AGING



UPOZORENJA

-  Ovaj uređaj nije igračka i nije prikladan za upotrebu na djeci. Držite ga izvan dohvata djece.
-  Uvijek provjerite uređaj prije nego počnete s njegovom upotrebom. Ne koristite ga ako je uređaj oštećen ili slomljen.
-  Ako se koristi u suhoj primjeni, uređaj može generirati statički elektricitet, to je normalno i ne utječe na njegovu upotrebu.
-  Držite USB kabel za punjenje i punjač uređaja suhim.

PREPORUKE

-  Ne koristite ovaj uređaj u sljedećim situacijama:
 - Trudnice ili dojilje; djeca; ljudi koji imaju srčani stimulator ili drugu elektroničku medicinsku opremu; ljudi s alergijskim reakcijama.
 - Ako imate kožne bolesti, poput otvorenih rana, gljivičnih infekcija, ekcema, osipa, opekline, opekotina od sunca, abnormalnog zarastanja rana, nanesenu šminku itd.

- Osobe s dijabetesom, sistemskim lupusom, porfirijom, zatajenjem srca, poremećaje krvarenja, povijest imunosupresivnih bolesti (uključujući HIV infekciju i AIDS), itd.
 - Ne koristite ovaj uređaj istovremeno s bilo kojom medicinskom elektroničkom opremom kao što su srčani stimulator, unutarnji defibrilator, ako imate aritmije ili poznatu srčanu bolest.
 - Ne koristite ovaj uređaj ako imate metalne implantate, piercinge, nakit ili madeže na području upotrebe.
 - Ne koristite ovaj uređaj ako primate terapiju zračenjem ili kemoterapiju.
 - Osobe s bolestima koje se pogoršavaju zagrijavanjem, poput herpes simplex virusa.
- ⊗ Ne koristite ovaj uređaj ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
- Ako vam se koža trenutno tretira ili je nedavno tretirana alfa-hidroksi kiselinama (AHA), beta-hidroksi kiselinama (BHA), lokalnim izotretinoinom i azelaičnom kiselinom.
 - Ako ste uzeli bilo koju vrstu lijeka Accutane A ili Roaccutane A u posljednjih šest mjeseci.
 - Ako uzimate lijekove koji povećavaju osjetljivost na svjetlost ili bilo koji drugi lijek propisan od strane liječnika, molimo provjerite uputu za pacijenta prije nego što počnete koristiti ovaj uređaj. Ako uputa za pacijenta navodi da može izazvati fotoalergijske ili fototoksične reakcije ili ako se navodi da trebate izbjegavati izlaganje suncu tijekom uzimanja lijeka, nemojte koristiti uređaj.

- Ako uzimate antikoagulantne lijekove, uključujući velike doze aspirina, koristite uređaj najranije jedan tjedan nakon što prestanete s terapijom.

Ovaj uređaj je pogodan za upotrebu na licu (čelo, obrazi, brada). Nikada ga nemojte koristiti na kapcima, usnama, prsima, području genitalija, grlu ili na područjima na kojima ste imali operaciju ili depilaciju. Ako vaša koža reagira na svjetlost ili je sklona alergijskim reakcijama, nemojte koristiti svjetlosnu terapiju. Nemojte gledati izravno u izvor svjetlosne terapije. Ne koristite svjetlosnu terapiju na koži ako područje tretmana ima infekcije, ekceme, opekline, upale folikula dlake, otvorene ogrebotine, herpes, rane ili lezije, hematome itd. Nemojte gledati izravno u LED svjetlo. Koristite zaštitu za oči tijekom tretmana svjetlosnom terapijom, poput sunčanih naočala ili zaštitnih naočala (nisu uključene). Ne popravljajte, rastavljajte ili modificirajte uređaj sami jer nepravilno rukovanje ga može oštetiti. Ne koristite ovaj uređaj u druge svrhe. Redovito čistite površinu uređaja i pribor kako biste produžili njihov vijek trajanja.

Preporučuje se korištenje gela kompatibilnog s ovim uređajem (kupuje se zasebno). Korištenje bilo koje druge kreme ili gela može utjecati na normalno funkcioniranje ovog uređaja i njegovu radio frekvencijsku funkciju.

Opis uređaja

TB-2187

Specifikacije uređaja

Naziv: All-In-One Uređaj za njegu lica BEEA Beauty, CANC, RF - Anti Aging

Model broj: TB-2187

Ulaz: 5V / 2A

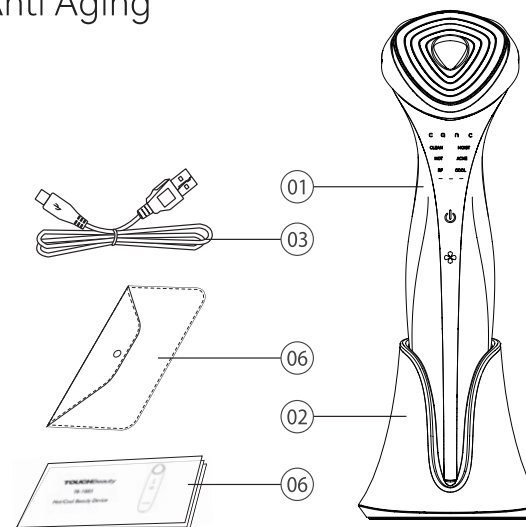
Snaga: 3.7V / 8.5W

Tip baterije: Li-polimer 3.7V 1500mAh

Komponente uređaja

- ① Glavna jedinica
- ② Postaja za punjenje
- ③ Kabel za punjenje


- ④ Krpica za čišćenje
- ⑤ Vrećica za pohranu
- ⑥ Upute za upotrebu



Slika 1

Karakteristike uređaja

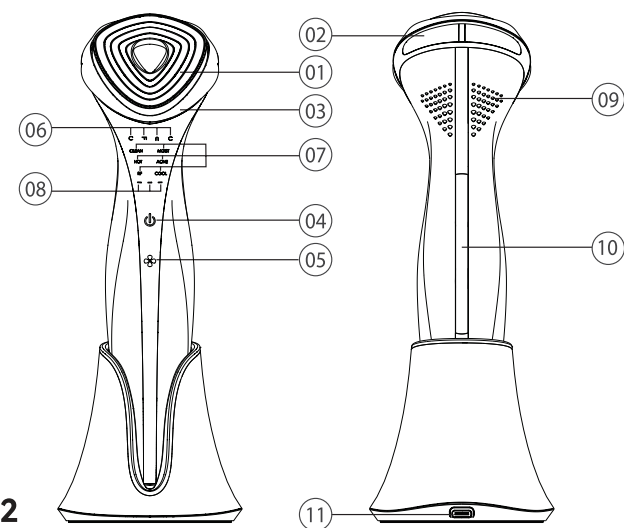- ① Glava za masažu lica
- ② Glava za parcijalnu masažu
- ③ Magnetni pamučni prsten
- ④ Gumb za uključivanje/isključivanje i odabir načina rada
- ⑤ Gumb za podešavanje razine intenziteta
- ⑥ Indikator CANCEL
- ⑦ Indikator načina rada
- ⑧ Indikatori razine intenziteta
- ⑨ Otvori za hlađenje
- ⑩ Elektrodni senzor
- ⑪ USB-C priključak za punjenje



Slika 2

Priprema za upotrebu

TB-2187

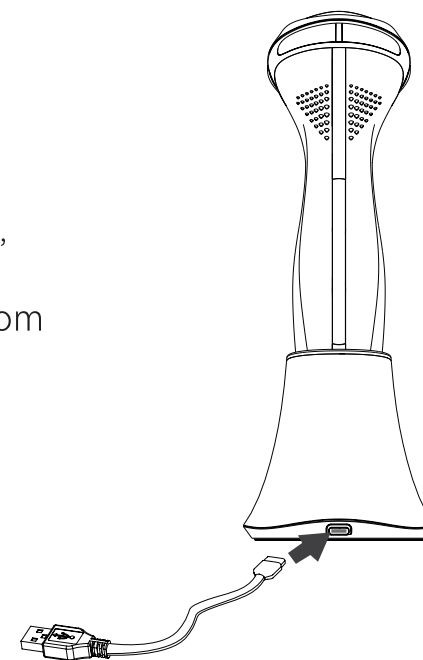
※ Baterija je slabo napunjena prije prvog korištenja uređaja. Napunite uređaj pomoću USB kabela.

Punjenje uređaja

- Ovaj uređaj ima bežični sustav punjenja. Prije nego što počnete puniti uređaj, umetnite jedan kraj kabela za punjenje u postaju za punjenje i drugi kraj priključite na adapter (nije uključen u pakiranje). Povežite adapter s električnom utičnicom. Pazite da koristite adapter s izlaznom strujom većom od 5V / 1A.

Stavite uređaj na postaju za punjenje da započnete punjenje. (Slika 3)





Punjenje uređaja traje oko 5 sati. Puna baterija omogućuje otprilike 60 minuta neprekidne upotrebe. Tijekom punjenja, indikatori razine intenziteta trepere u ciklusu. Kada je potpuno napunjen, svi indikatori razine intenziteta neprekidno svijetle. (Slika 4)




Slika 3

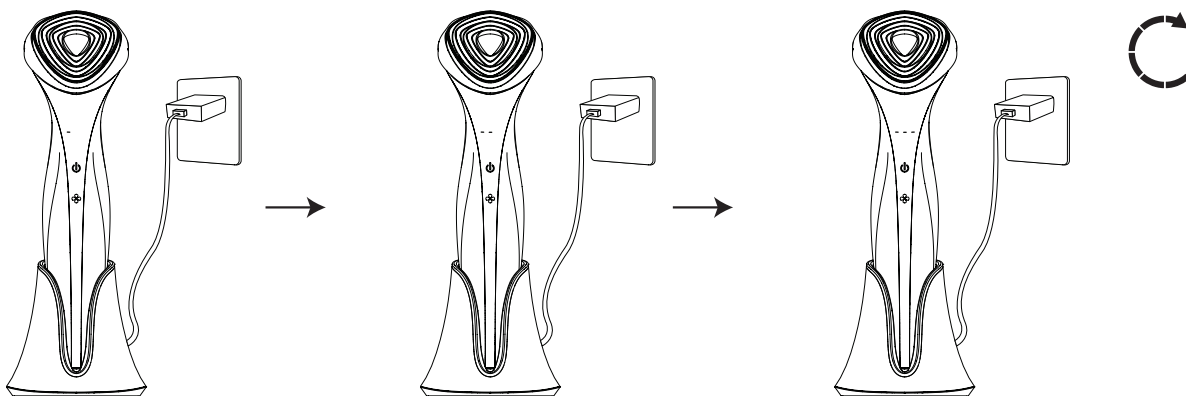- Ako je baterija slaba, indikatori načina rada i razine intenziteta trepere 5 puta istovremeno, a uređaj se automatski isključuje.









🔌 Uključivanje-isključivanje i prekidač načina rada:

- ✂️ Prekidač za napajanje/razinu intenziteta  i gumbi za podešavanje razine  imaju dizajn dodira i pritiska.
- Kada pritisnete gumb  prstom, uređaj će vibrirati kako bi pokazao da je pritisnut ispravno područje. Morat ćete primijeniti pritisak da ga uključite. Ako pritisnete gumb i nema vibracija, trebat ćete ponovno prilagoditi položaj prsta.
- Ako gumb  ne vibrira za vrijeme pritiska, pritisnite gumb jače.


Slika 4



Upute za uporabu


Funkcija	Opis funkcije	Način korištenja	Razina intenziteta
Uključivanje / isključivanje	/	Pritisnite & držite 	/
Način rada CLEAN	Pozitivni ioni + vibracije	Pri uključivanju uređaja, uključuje se; CLEAN – zadani način rada	Pritisnite  za podešavanje razine intenziteta – 3 razine. Pritisnite dva puta uzastopno kako biste uključili-isključili vibracije.
Način rada HOT	EMS + toplinska terapija + vibracije	Pritisnite  1 put.	Pritisnite  za podešavanje razine intenziteta EMS-a – 3 razine. Pritisnite dva puta brzim pritiskom za uključivanje/isključivanje vibracija.
Način rada RF	RF + EMS + MC + crveno + infracrveno svjetlo	Pritisnite  1 put.	Pritisnite  za podešavanje razine intenziteta RF-a – 3 razine.
Način rada MOIST	Negativni ioni + vibracije	Pritisnite  1 put.	Brzo pritisnite  za podešavanje razine intenziteta vibracija – 3 razine. Pritisnite dva puta brzim slijedom za uključivanje-isključivanje vibracija

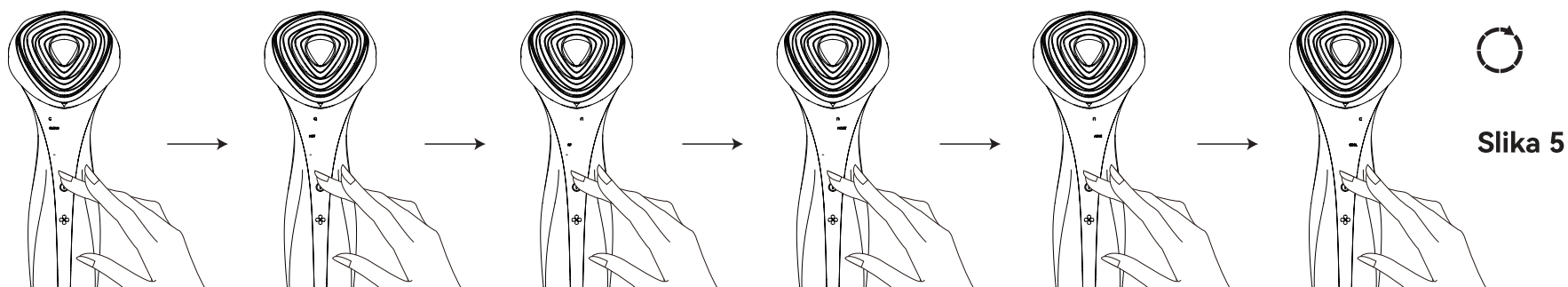- Možete mijenjati načine u ciklusu: **CLEAN→HOT→RF→MOIST→ACNE→COOL**. Prilikom prebacivanja između načina rada, indikator svakog odgovarajućeg načina svijetli. (Slika 5)



- Intenzitet se može podešavati u ciklusu: **Razina 1 → Razina 2 → Razina 3**. Kada prelazite između razina intenziteta, odgovarajući indikator svijetli. Ako se razina intenziteta odabranog načina ne može podešavati, indikator razine intenziteta se isključuje. (Slika 6)

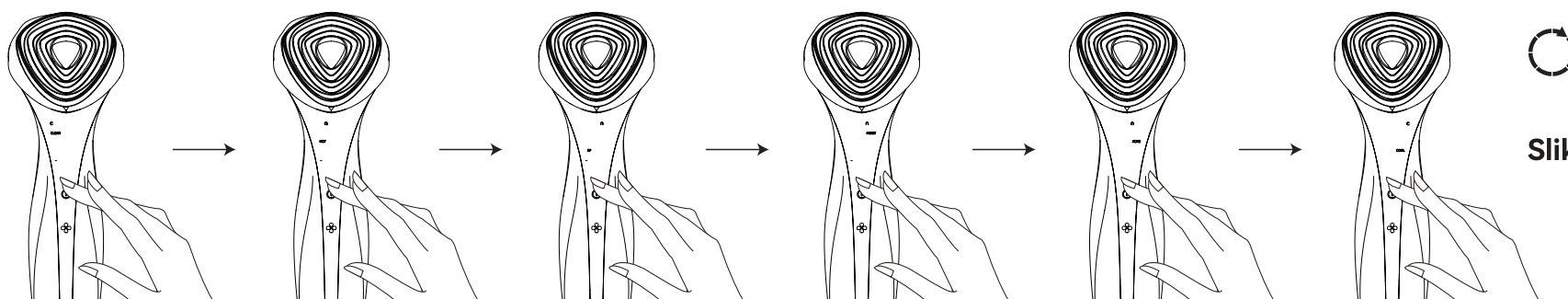- Neke funkcije dijela masažne glave aktiviraju se istovremeno s masažnom glavom za lice. Možete koristiti dio masažne glave prema svojim potrebama:




Slika 6

Način rada	CLEAN	HOT	RF	MOIST	ACNE	COOL
Funkcija uključena	Pozitivni ioni + vibracija	EMS + vibracije	RF+EMS+MC	Negativni ioni + vibracija	/	/


⚠ NAPOMENE

- Kada koristite dio masažne glave, pobrinite se da srednje područje dolazi u kontakt sa kožom tako da su obje elektrode u kontaktu s kožom. (Slika 7)
- Kada trebate koristiti RF način rada glave za njegu, koristite najnižu razinu intenziteta jer je koža oko očiju osjetljiva. Ne dodirujte kapke i očne jabučice prilikom korištenja ovog uređaja.

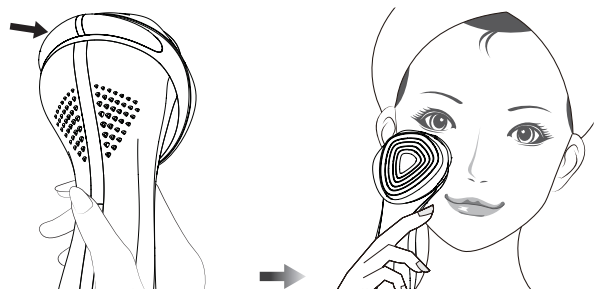※ Kada koristite CLEAN/MOIST načine, pobrinite se da prsti dodiruju senzor elektrode tijekom korištenja uređaja. (Slika 8)



Slika 7

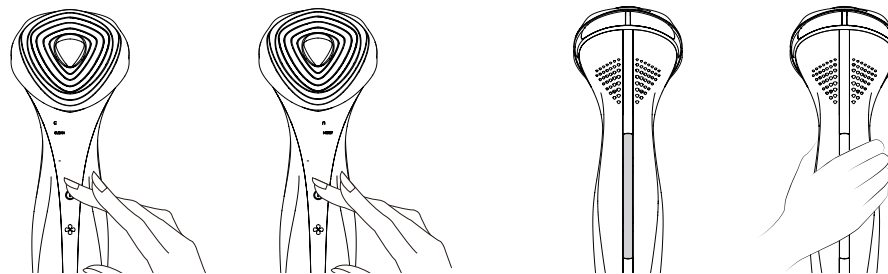

Slika 8

※ Ovaj uređaj ima funkciju memorije. Automatski aktivira način rada koji ste koristili prije isključivanja uređaja. Međutim, ako uređaj ostane bez baterije, aktivira zadane postavke načina rada nakon punjenja.

🧘 Predstavljanje CANC znanstvene njege kože:

※ Ovaj način kombinira upotrebu uređaja za njegu kože i proizvoda vanjske primjene za njegu kože kako bi se povećala učinkovitost. Ova znanstvena metoda 4 koraka - Čišćenje - Aktivacija - Njega - Skrb daje život CANC modelu njege kože kroz funkcije ovog uređaja

※ Ovaj uređaj ne uključuje proizvode za njegu kože. Možete koristiti svoje omiljene proizvode za njegu kože.

CANC čišćenje – aktivacija – njegovanje, briga lica u 4 koraka:	Funkcija i preporučena upotreba	Primjena s proizvodima za njegu kože
1.[C] Čišćenje (Clean) Dubinski čisti kožu.	CLEAN (Svakodnevna upotreba)	Uklonite šminku, napravite dvostruko čišćenje. Koristite vatu i sredstvo za uklanjanje šminke.
2.[A] Aktivacija (Activate) Aktivira kožu i otvara pore.	HOT (Svakodnevna upotreba)	Otvorite pore i poboljšajte apsorpciju. Koristite s tonikom ili maskom za lice.
3.[N] Njega (Nourish) Fotoelektrična ljepota potiče apsorpciju.	RF (2–3 dana za redom)	Protiv starenja: pomaže zatezanju kože uz upotrebu posebnog gela.
	MOIST (Svakodnevna upotreba)	Poboljšava apsorpciju, nakon nanošenja esencije.
	ACNE (po potrebi)	Smanjuje pojave akni. Koristite izravno na koži ili s proizvodima za njegu kože kod akni.
4.[C] Skrb (Care) Zaključava hranjive tvari i povećava razinu hidratacije.	COOL (Svakodnevna upotreba)	Pomaže zatezanju pora, umiruje kožu. Koristite nakon nanošenja losiona ili hidratantne kreme.

Kako koristiti:

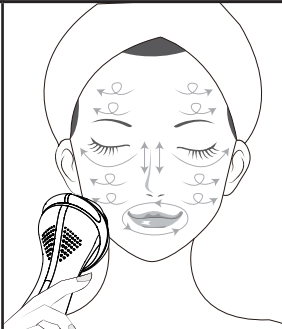
TB-2187

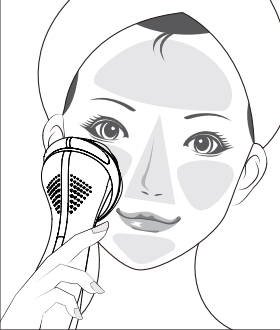

※ Da biste osigurali ispravno funkcioniranje ovog uređaja, molimo pažljivo pročitajte upute prije upotrebe.


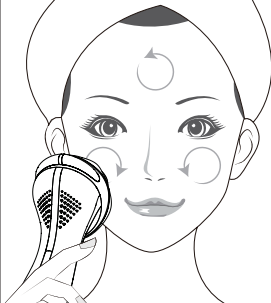
Korištenje uređaja


● Očistite kožu prije upotrebe uređaja i pobrinite se da je uređaj napunjen.

※ Način upotrebe

CANC	Način rada	Funkcija	Preporučeni način korištenja	Tehnika korištenja
C	CLEAN	Način rada čišćenja lica: Pozitivni ioni + vibracije za čišćenje	<ol style="list-style-type: none">① Uklonite magnetski prsten. Stavite vatu na površinu masažne glave i pritisnite magnetski prsten da fiksirate vatu.② Nanesite svoje uobičajeno sredstvo za skidanje šminke na vatu.③ Uključite uređaj i odaberite način rada CLEAN.④ Prilagodite intenzitet vibracija prema svojim preferencijama.⑤ Čistite kožu kružnim pokretima prema ilustraciji.⑥ Nakon upotrebe, isključite uređaj.	

CANC	Način rada	Funkcija	Preporučeni način korištenja	Tehnika korištenja
Q	HOT	Način rada revitalizacije: EMS + topla masaža + vibracije	<ol style="list-style-type: none"> ① Nanesite toner ili masku za lice na kožu. ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada HOT. ③ Prilagodite intenzitet EMS-a prema toleranciji vaše kože. ④ Nanesite masažnu glavu za lice na kožu i masirajte prema ilustraciji. Koristite ovaj način rada 4-6 minuta po sesiji. ⑤ Nakon upotrebe, isključite uređaj. 	
U	RF	Način rada protiv starenja: RF (2 MHz) + EMS + MC + crvena svjetlost + infracrvena svjetlost	<ol style="list-style-type: none"> ① Ravnomjerno nanesite gel na bazi vode na lice. ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada RF. ③ Prilagodite intenzitet RF-a prema toleranciji vaše kože. ④ Masirajte kožu masažnom glavom za lice kružnim pokretima prema ilustraciji. Koristite ovaj način rada 4-6 minuta po sesiji. ⑤ Nakon upotrebe, operite lice. 	

CANC	Način rada	Funkcija	Preporučeni način korištenja	Tehnika korištenja
	MOIST	Način rada pojačavanja: Negativni ioni + vibracije	<ol style="list-style-type: none"> ① Nanesite esenciju na kožu. ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada MOIST. ③ Prilagodite intenzitet vibracija. ④ Masirajte lice kružnim pokretima prema ilustraciji. Koristite ovaj način rada 4-6 minuta po sesiji. ⑤ Nakon upotrebe, isključite uređaj. 	
	ACNE	Način rada za akne: Mješavina crvene i plave svjetlosti + infracrvena svjetlost + topla masaža	<ol style="list-style-type: none"> ① Možete nanijeti kozmetičke proizvode za njegu kože s aknama na područja sklonim aknama, ovisi o potrebama vaše kože). ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada ACNE. ③ Masirajte lice laganim kružnim pokretima prema ilustraciji. Koristite ga dva puta dnevno, 5 minuta po sesiji. ④ Nakon upotrebe, isključite uređaj. 	

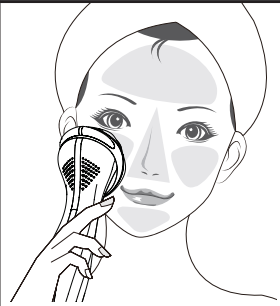CANC	Način rada	Funkcija	Preporučeni način korištenja	Tehnika korištenja
C	COOL	Način rada protiv starenja: RF (2 MHz) + EMS + MC + crvena svjetlost + infracrvena svjetlost	<ol style="list-style-type: none"> ① Nanesite toner ili masku za lice. ② Uključite uređaj i aktivirajte način rada COOL. ③ Prilagodite intenzitet EMS-a prema toleranciji vaše kože. ④ Nanesite masažnu glavu za lice na kožu i masirajte prema ilustraciji. Koristite ovaj način rada 4-6 minuta po sesiji. ⑤ Nakon upotrebe, isključite uređaj. 	

Kombinacija načina rada:

- Dnevna njega kože: ① Operite lice → ② CLEAN → ③ HOT → ④ MOIST → ⑤ COOL.
- Protiv starenja: Preporučuje se korištenje RF-a 2-3 puta tjedno. Prilikom korištenja slijedite preporučeni redoslijed: ① Operite lice → ② CLEAN → ③ HOT → ④ RF → ⑤ MOIST → ⑥ COOL.

Koristite ovaj uređaj redovito za optimalne rezultate.

- Akne: Ne koristite ovaj način rada ako nemate akne. Ako imate kožu sklonu aknama ili aktivne akne, koristite ovaj način rada dva puta dnevno. Koristite način rada ACNE prije COOL načina rada.

☼ NAPOMENE

※ Prilikom korištenja funkcije radiofrekvencije (RF način rada):

- Skinite sav nakit s tijela prije upotrebe uređaja, uključujući naušnice, prstene, ogrlice itd.
- Ponovno nanesite gel ako vam koža postane suha tijekom upotrebe.
- Za nove korisnike, testirajte gel ili esenciju na koži 24 sata prije početne upotrebe. Nanesite malu količinu gela ili esencije na unutrašnju stranu ruke kako biste se uvjerali da ne uzrokuje reakciju kože.
- Koristite uređaj s gelom ili esencijom na unutrašnjoj strani ruke 24 sata prije nego što koristite uređaj. Nakon upotrebe, koža može pokazivati znakove crvenila ili blago natečen izgled tijekom kratkog vremena. Ako ove reakcije ne nestanu u roku od 24 sata, obratite se liječniku.
- Izbjegavajte predugo korištenje uređaja na obrazima ili na područjima na kojima ne želite smanjenje volumena.
- RF funkcija pruža osjećaj topline. Ako osjećate da temperatura nije dovoljna za vašu kožu, usporite pokrete masaže.
- Tijekom upotrebe, ne ostavljajte uređaj na jednom mjestu duže od 2-3 sekunde. Pazite da uređaj pomičete po koži kako biste spriječili manje opekline zbog različite osjetljivosti i tolerancije kože.
- Osjet kože i rezultati mogu varirati od osobe do osobe i područja korištenja.

※ Prilikom korištenja funkcije svjetlosne terapije (RF/akne način rada):

- Ne gledajte direktno u izvor svjetlosti.

Briga o uređaju:

TB-2187

Čišćenje i održavanje

- ※ Očistite uređaj čistom, lagano navlaženom krpom prije i poslije korištenja.
- Uvijek se pobrinite da isključite uređaj prije čišćenja.
- Nemojte uranjati ili čistiti uređaj izravno vodom ili drugim tekućim tvarima.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva, kemikalije ili korozivna deterdžente za čišćenje uređaja.

Skladištenje

- Ovaj uređaj ima ugrađenu litij-ionsku bateriju. Nemojte ostavljati ili skladištiti uređaj na vrućim i vlažnim mjestima. Ako uređaj ne koristite često, pobrinite se da napunite bateriju prije nego što je spremite.

Odlaganje baterija

- Litij-ionske baterije sadrže tvari koje mogu onečistiti okoliš. Ne odlažite ovaj uređaj s kućnim otpadom. Umjesto toga, predajte ga na reciklažno dvorište kako biste pridonijeli zaštiti okoliša.

 Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Baterija je prazna.	Napunite uređaj prema uputama za upotrebu.
Ne osjeća se toplina ili mikrostruja na koži.	Nedovoljno gela ili esencije je nanoseno na kožu.	Nanesite više gela ili esencije.
	Kretanje masažnom glavom je prebrzo.	Usporite pokrete masažnom glavom.
	Uređaj je prestao s radom.	Upravljajte masažnom glavom polako i ravnomjerno.
Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon korištenja gore navedenih rješenja, prestanite koristiti i obratite se trgovini ili lokalnom distributeru.		

Jamstveni list

✂ Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara “ne radi”, te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda

- Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećivanjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem .Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis:

Feniks-Info d.o.o.

Slavonska avenija 72, Zagreb,

servis@feniks-info.hr

tel 01/6395 281

Datum kupnje: _____ Pečat i potpis: _____