


BEEA Beauty

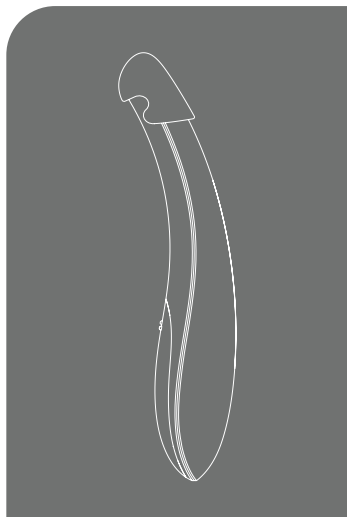

Hot & Sonic, masažer za područje oko očiju

TB-1583

UPUTE ZA UPOTREBU

Sigurnosne upute

Da biste osigurali ispravno funkcioniranje ovog uređaja, molimo pročitajte pažljivo ove upute prije korištenja uređaja i sačuvajte ih za buduću referencu.

⚠ UPOZORENJE

Ne koristite ovaj uređaj u sljedećim uvjetima:

- Trudnice ili za vrijeme dojenja;
- Osobe s alergijama
- Osobe s paralizom lica
- Osobe koje su imale operaciju očiju
- Osobe s ugrađenim umjetnim trepavicama
- Osobe s bolestima oka i drugim problemima s očima
- Provjerite uređaj prije početka korištenja, ne koristite ga ako je oštećen.
- Ne koristite uređaj dok nosite kontaktne leće.
- Ako osjetite nelagodnost prilikom korištenja uređaja, odmah ga prestanite koristiti i konzultirajte se s liječnikom.
- Ne pokušavajte mijenjati, rastavljati ili popravljati uređaj sami kako biste izbjegli nesreće.

⚠ OPREZ

Ne dijelite isti uređaj s drugima.

Čuvajte uređaj izvan dohvata djece.


Redovito čistite uređaj kako biste produžili njegov vijek trajanja. Ovaj uređaj radi na baterije. Ako ga dugo ne koristite, izvadite bateriju.

Specifikacije proizvoda

- Naziv: Masažer za područje oko očiju BEEA Beauty, Hot & Sonic
- Model broj: TB-1583
- Snaga: 1.5V /1W
- Vrsta baterije: AAA x 1 (nije uključena)

Opis proizvoda


- 1 Masažna glava
- 2 Tijelo uređaja
- 3 Pametni senzor
- 4 Zaštitna kapica
- 5 Poklopac baterije

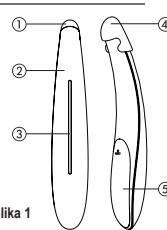

Slika 1

Korištenje uređaja

- ※ Vrijeme trajanja baterije: 3 sata.
- ※ Umetnite 1 AAA bateriju u pretinac za baterije sljedeći oznake polariteta (slika 2) (baterija nije uključena).

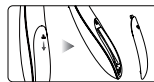

Slika 2

Masaža očiju

Koristite uređaj na čistoj koži. Nanesite sloj kreme/seruma za oči na kožu oko očiju. Držite tijelo uređaja i osigurajte da su prsti u kontaktu s pametnim senzorom. Lagano pritisnite masažnu glavu na kožu, polako i nježno je klizite ili vršite lagani pritisak. Uvijek masirajte od unutarnjeg prema vanjskom kutu oka. Dopustite kremi da potpuno upije (slika 3). Koristite uređaj svaki dan ili prema potrebama vaše kože. Preporučuje se korištenje uređaja po 1 minutu na svako oko.



Slika 3



Slika 4



Masaža lica

- Nanesite sloj kreme/losiona na lice. Držite tijelo uređaja i osigurajte da su prsti u kontaktu s pametnim senzorom.
- Masirajte lice prema preporuci dok krema/losion potpuno ne upije (slika 4):

- a) Pomičite masažnu glavu od središta čela prema sljepoočnicama (duž obrva).
- b) Pomičite masažnu glavu od brade prema kutu usta.
- c) Pomičite masažnu glavu od kuta usta prema ušima.

Čišćenje i održavanje

- Ne uranjajte uređaj u vodu. Očistite ga suhom ili vlažnom krpom.
- Ne koristite alkohol, čeličnu vunu, abrazivna sredstva ili korozivne tekućine za čišćenje uređaja. To može rezultirati nepravilnim radom ili promjenom boje uređaja.

• Odlaganje baterija

Baterije sadrže tvari štetne za okoliš. Nemojte odlagati baterije sa kućanskim otpadom, umjesto toga, predajte ih na reciklažno dvorište radi zaštite okoliša.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Baterija je prazna ili nema napajanja.	Zamijenite bateriju prema uputama.
	Baterija je pogrešno instalirana.	Uklonite bateriju i instalirajte je prema uputama.
	Vaši prsti nisu u kontaktu s pametnim senzorom.	Osigurajte da su vaši prsti u kontaktu s pametnim senzorom prilikom korištenja uređaja.
Drugi problemi.	/	Kontaktirajte lokalnog prodavatelja.

Napomena: Ako uređaj i dalje ne radi ispravno nakon korištenja gore navedenih rješenja, molimo prestanite koristiti uređaj i kontaktirajte lokalnog prodavatelja.

Jamstveni list

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produkuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda
- Ako je proizvod otvaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Ovlašteni servis: Feniks-Info d.o.o. Slavonska avenija 72, Zagreb, servis@feniks-info.hr tel 01/6395 281

Datum kupnje: _____

Pečat i potpis: _____