


## BEEA Beauty

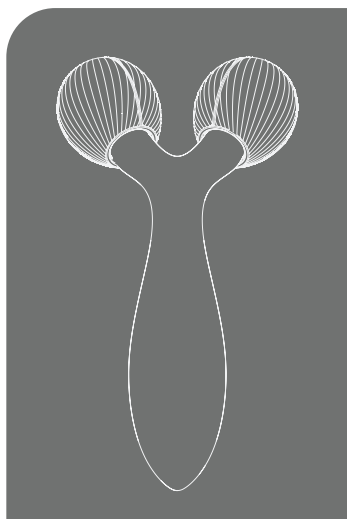

Valjak za masažu tijela i lica, mikrostruja

TB-1613A

### UPUTE ZA UPOTREBU

#### Sigurnosne upute

Kako biste osigurali ispravan rad ovog proizvoda, molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja proizvoda i sačuvajte ih za buduću referencu.

#### ⚠ UPOZORENJE

Ne koristite ovaj proizvod u sljedećim situacijama:

- Trudnice ili tijekom dojenja
- Osobe s alergijama
- Osobe s ranama, ispucalom kožom, kvrgama, drugim kožnim bolestima ili stanjima na području primjene proizvoda.
- Provjerite proizvod prije početka korištenja. Ne koristite ovaj proizvod ako je oštećen ili izgleda oštećen.
- Odmah prestanite koristiti proizvod i konzultirajte se s liječnikom ako se osjećate loše.
- Ne pokušavajte sami mijenjati, rastavljati ili popravljati proizvod.

#### ⚠ OPREZ


- Ne dijelite isti proizvod s drugima.
- Redovito čistite proizvod kako biste produljili njegov vijek trajanja.

#### Specifikacije proizvoda

- Naziv: Valjak za masažu tijela i lica BEEA Beauty, mikrostruja
- Model broj: TB-1613A

#### Opis proizvoda

- 1) Valjci za masažu i oblikovanje
- 2) Drška
- 3) Torbica za pohranu
- 4) Krpa za čišćenje

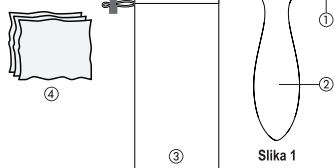

Slika 1

#### Korištenje uređaja

※ Koristite Valjak za oblikovanje tijela na koži pod različitim kutovima kako biste povećali učinkovitost masaže. Može se koristiti na licu i tijelu prema preporukama.

Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5



Slika 6



Slika 7



**1) Masaža lica:** Nježno pomičite valjke od čeljusti do obraza. Zatim lagano pomičite valjke od kraja usta prema uhu (slika 2).

**2) Masaža vrata:** Nježno pomičite valjke s ramena prema vratu i donjoj čeljusti (slika 3).

**3) Masaža ruku:** Nježno pomičite valjke duž ruke (slika 4).

**4) Masaža prsa:** Nježno pomičite valjke od pazuha prema središtu prsa (slika 5).

**5) Masaža struka:** Masirajte struk laganim kretanjem valjka gore i dolje (slika 6).

**6) Masaža nogu:** Nježno pomičite valjke od gležnjeva prema bedrima (slika 7).

#### Čišćenje i održavanje

- Ne uranjajte ovaj proizvod u vodu. Proizvod očistite suhom ili vlažnom krpom.
- Ne koristite čeličnu vunu, abrazivna sredstva ili korozivne tekućine za čišćenje proizvoda.
- Nikad ne koristite bilo kakvo mazivo, deterdžent, sredstvo za poliranje ili osvježivač zraka na ovom proizvodu.

#### • Odlaganje uređaja

Nemojte bacati ovaj proizvod u obični kućni otpad, umjesto toga ga predajte u reciklažno dvorište radi zaštite okoliša.

#### Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Valjci za masažu se ne okreću glatko.	Ima nakupljenih nečistoća u prostoru između valjaka.	Očistite prostor između valjaka.
Drugi problemi.	/	Kontaktirajte lokalnog prodavatelja.

Napomena: Ako proizvod i dalje ne radi ispravno nakon korištenja gore navedenih rješenja, molimo prestanite koristiti proizvod i kontaktirajte lokalnog prodavatelja.

#### Jamstveni list

Jamstveni rok počinje teći od datuma kupnje proizvoda. Trajanje jamstva je 1 godina. U slučaju kvara uređaj možete reklamirati direktno u trgovini u kojoj je kupljen.

U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen upotrebe stvari, međutim kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovo od zamjene, odnosno vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, ovaj jamstveni list, te detaljan opis kvara. Ukoliko nije definiran opis kvara, podrazumijeva se da je opis kvara "ne radi", te da će se uređaj testirati samo na osnovnu funkcionalnost.

Jamstvo se ne priznaje u sljedećim uvjetima:

- Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
- Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda
- Ako je proizvod otkaran, prepravljani ili popravljeni od neovlaštene osobe.
- Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
- Ako su kvarovi nastali oštećenjem, zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
- Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod uključen

Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

**Ovlašteni servis:** Feniks-Info d.o.o. Slavonska avenija 72, Zagreb, servis@feniks-info.hr tel 01/6395 281

Datum kupnje: \_\_\_\_\_

Pečat i potpis: \_\_\_\_\_